


FORTEO 骨穩®

骨穩，20 微克 (ug) 80 微升 (ul)
注射液，預先充填之注射筆

使用說明


在您使用新的骨穩注射筆之前，請仔細閱讀本段使用說明。
使用骨穩注射筆時，小心地遵照下列指示。
並請閱讀包裝中的藥品說明書。

您的骨穩注射筆含有**28天份的藥劑**。

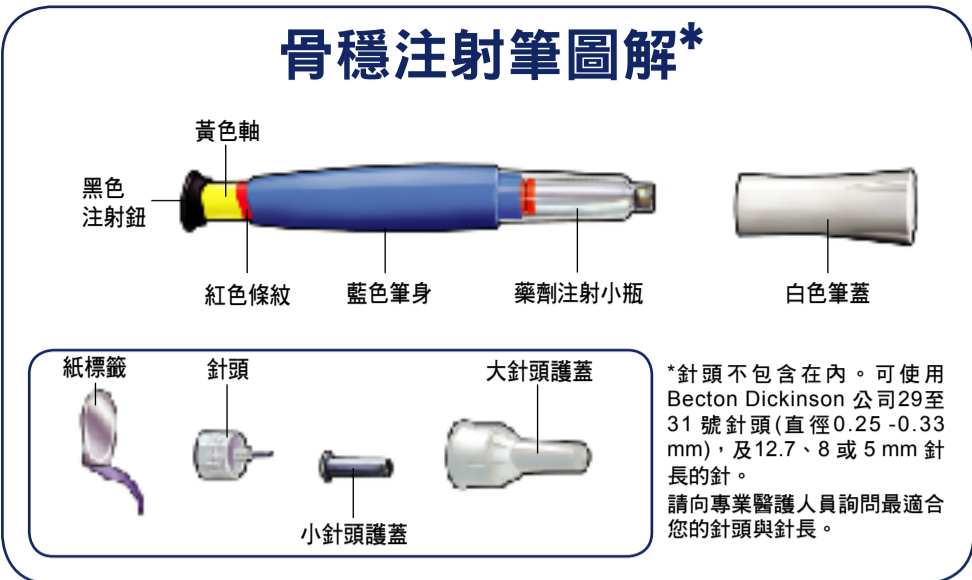


每次注射之前，請務必先清洗雙手。請依照專業醫護人員的指示準備注射部位。


1
打開
白色筆蓋

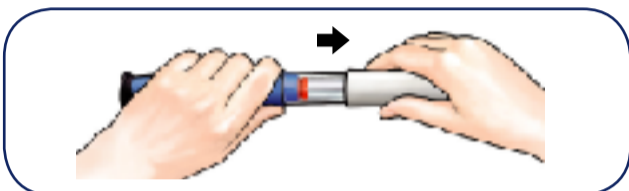


2
裝上
新的
針頭

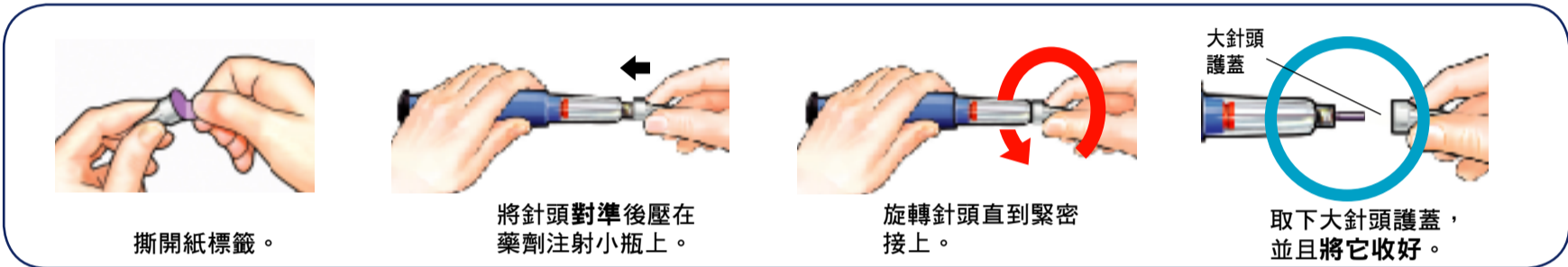

3
設定
劑量

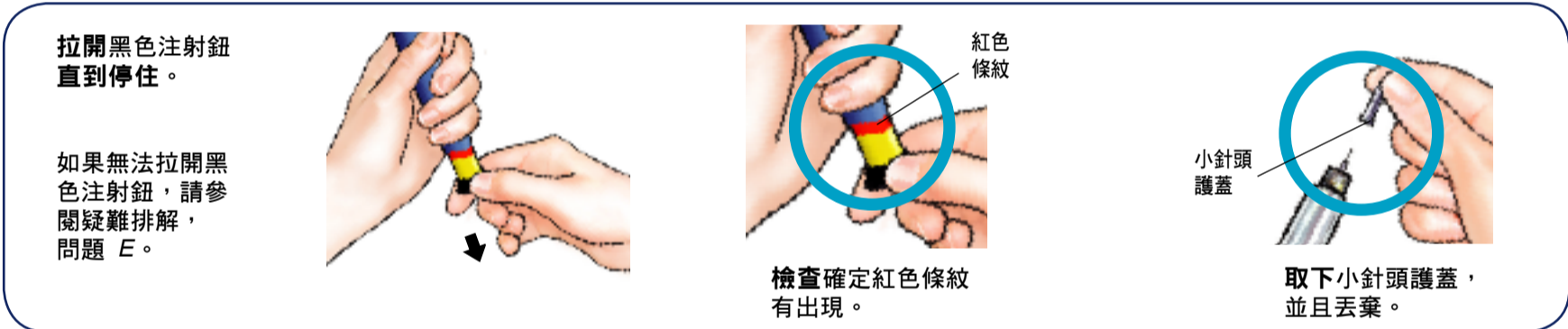

4
注射
藥劑

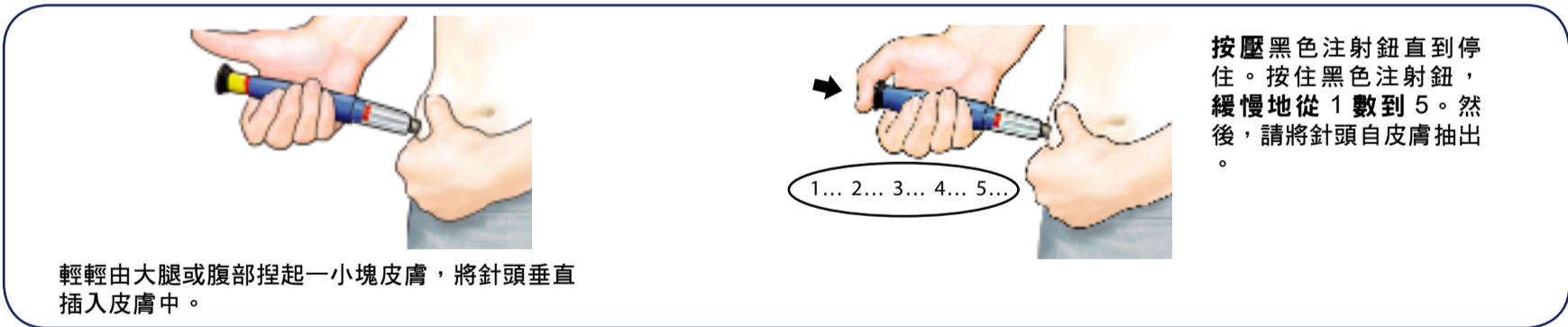

5
確認
劑量



6
取下
針頭



PA 8080 FS XAP



FORTEO 骨穩®

骨穩，20 微克 (ug) 80 微升 (ul)
注射液，預先充填之注射筆

疑難排解

問題

解答

A. 黑色注射鈕按到底後，黃色軸仍看得見。我要如何重新設定骨穩注射筆？



請依照下列步驟，重新設定骨穩注射筆。

- 1) 如果您已經注射過，請不要於同一天內注射第二次。
- 2) 取下針頭。
- 3) 裝上新的針頭，取下大針頭護蓋，並且將它收好。
- 4) 拉開黑色注射鈕直到停住。檢查確定紅色條紋有出現。
- 5) 取下小針頭護蓋，並且丟棄。
- 6) 將針頭朝下放進空的容器中。按壓黑色注射鈕直到停住。按住黑色注射鈕，緩慢地從 1 數到 5。您可能看到小水柱或幾滴液體流出。完成時，黑色注射鈕應該已按到底。
- 7) 如果您仍然看到黃色軸，請聯絡您的醫療專業人員。
- 8) 將大針頭護蓋套在針頭上。將大針頭護蓋完全地旋轉 3 至 5 次，以旋開針頭。將針頭護蓋取下，請依照專業醫護人員的指示丟棄。蓋上白色筆蓋，將骨穩注射筆放回冰箱中。

避免發生這個問題，請務必在每次注射時，裝上新的針頭，將黑色注射鈕按到底，並且緩慢地從 1 數到 5。

B. 我要如何確定我的骨穩注射筆可操作？

骨穩注射筆的設計為每次注射完整劑量，請依照使用說明的指示使用此注射筆。黑色注射鈕按到底表示您已經自骨穩注射筆中注射完整劑量。

請切記每次注射時，使用新的針頭，以確定您的骨穩注射筆可正常操作。

C. 我的骨穩藥劑中出現氣泡。

小氣泡不會影響劑量，也不會對您造成傷害。您可以和平常一樣繼續注射您需要的劑量。

D. 我無法取下針頭。

- 1) 將大針頭護蓋套在針頭上。
- 2) 使用大針頭護蓋旋開針頭。
- 3) 將大針頭護蓋完全地旋轉 3 至 5 次，以旋開針頭。
- 4) 如果您仍然無法取下針頭，請尋求他人協助。

E. 如果我無法拉開黑色注射鈕，我應該做什麼？

請改用新的骨穩注射筆注射您的醫療專業人員請您施打的劑量。

這表示您已使用完所有可注射正確劑量的藥劑，即使您看到藥劑注射小瓶中仍有藥液。

清潔與儲存

清潔您的骨穩注射筆

- 用濕布擦拭骨穩注射筆外圍。
- 不要將骨穩注射筆放進水中，或是用任何液體清洗。

儲存您的骨穩注射筆

- 每次使用後，請立刻將骨穩注射筆放回冰箱中。請閱讀並遵守骨穩說明書中病患資訊的指示，以儲存藥劑。
- 不要儲存仍裝著針頭的骨穩注射筆，因為這樣藥劑注射小瓶中可能會產生氣泡。
- 將骨穩注射筆蓋上白色筆蓋後儲存。
- 絕對不可以將注射筆存放在冷凍庫中。
- 如果藥劑已經結凍，丟棄此注射筆，並使用新的骨穩注射筆。
- 如果注射筆未放回冰箱中，不要丟棄這注射筆。將注射筆放回冰箱中並請聯絡您的醫療專業人員。

其他重要注意事項

- 骨穩注射筆含有 28 天份的藥劑。
- 不可將藥液轉移至注射針筒。
- 在日曆上記錄第一次注射日期。
- 閱讀並遵守骨穩說明書中病患資訊的指示，以使用藥劑。
- 檢查骨穩注射筆上的產品標籤，以確定您使用對的且未過期的藥品。
- 如果您注意到下列情形，請聯絡您的醫療專業人員：
 - 骨穩注射筆似乎有破損。
 - 藥劑不是澄清、無色且無固體顆粒。
- 每次注射時，裝上新的針頭。
- 注射時，您可能聽到一或兩聲卡嗒聲 - 這是正常的注射筆操作聲音。
- 不要與其他人共用您的注射筆。
- 若沒有受過適當訓練的人員從旁協助，不建議盲人或視力不良的人使用骨穩注射筆。
- 請將骨穩注射筆放在小孩拿不到的地方。

針頭與注射筆的丟棄處理

針頭與骨穩注射筆的丟棄處理

- 丟棄骨穩注射筆前，請確認針頭已移除。
- 請依照專業醫護人員的指示，丟棄您的骨穩注射筆及使用過的針頭。
- 第一次使用後 28 天，請丟棄注射筆。

製造廠：Lilly France S.A.S.
Rue Du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, France

藥商：台灣禮來股份有限公司
台北市復興北路365號11樓

Literature revised December 01, 2009

PA8080 FSXAP